



Therawave ET-6000

Specifications

Currents	-Tens Norm -Tens FM -Tens CM -Tens WM -Tens SD -Tens RND -Tens RECP -Tens BST -Faradic FAR -Faradic FES -IDC
Current Ranges	1~150 mA
Frequency Ranges	1~250 Hz
Time Ranges	1~60 min
Pause Range	15~300 μ sec
Power Input	220V
Weight	~2.6Kg
Dimensions	~320*280*110 mm

راهنمای استفاده

پنجره Test:

در این پنجره تست اتصال پراپ انجام می‌شود.

TEST	A, B
Short circuit the electrodes.	
CHA:	CHB:

موج IDC:

در این پنجره که جریان خروجی IDC است، فقط تنظیمات مربوط به

زمان وجود دارد و با افزایش ولوم کنترل کننده ی جریان

دستگاه شروع به کار می‌کند.

IDC	15
Freq: - - HZ	1.011
p.w: - - μ S	3.041
Mode:	4.060
	5.072
	6.086

پنجره Protocols:

در این پنجره برنامه درمانی های از پیش تعریف شده در دستگاه

وجود دارد که با استفاده از ولوم کنترل کننده می‌توان آنها را انتخاب و وارد

تنظیمات آن‌ها شد و خروجی دستگاه با استفاده از افزایش ولوم کنترل جریان شروع به کار می‌کند.

A, B	PROTOCOLS
1- Arthrosis Acute	
2- Arthrosis Chronic	
3- Atrophy Mild	

توجه: جهت قطع اضطراری دستگاه کلید STOP را لمس می‌کنیم.

۲..... موارد کاربرد و عدم کاربرد.....

۳..... اجرای تنظیم کننده.....

۴..... مراحل راه اندازی، شرح پنجره نمایش، منو اصلی.....

۵..... Tens, FAR, FES.....

۶..... Protocols, IDC, Test.....



شرح پنجره نمایش:

به محض روشن شدن دستگاه آرم شرکت


نمایش داده می‌شود.

منوی اصلی:


در این پنجره انواع فرکانس های Tens و FAR و FES

و IDC و برنامه درمانی وجود دارد که با استفاده از

چرخش ولوم کنترل کننده می‌توان آن را انتخاب کرد.

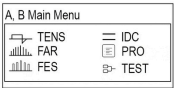

اجزای تنظیم کننده ها:

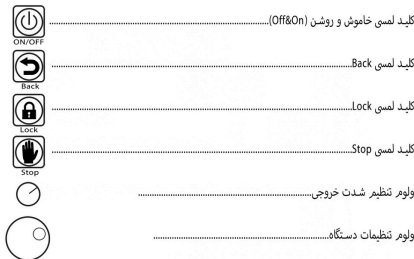

موارد کاربرد:

(۱) رفع گرفتگی عضلات

(۲) افزایش جریان خون موضعی

(۳) جلوگیری از آتروفی عدم حرکت

(۴) بازآموزی حرکات عضلات

(۵) حفظ یا افزایش دامنه حرکتی

(۶) تسکین یا از بین بردن درد

(۷) کاهش درد های میوفاشیال

(۸) کاهش سردرد های نوع تشنج یا میگرنی

موارد عدم کاربرد:

(۱) افرادی که از Pacemaker استفاده می‌کنند

(۲) درد های ناشناخته

(۳) افراد مبتلا به بیماری های بدخیم (Tumors Malignant)

(۴) افرادی که مبتلا به صرع می‌باشند

(۵) از قرار دادن الکترود در نواحی زیر اجتناب کنید:


سینوس های کاروتید، زخم های باز، ناحیه‌ای که اختلال حسی دارد، داخل دهان یا ناحیه شکم

موج Tens:

با انتخاب موج Tens می‌توان تنظیمات مربوط به فرکانس

تاخیر پالس، مود فرکانسی و زمان را انتخاب کرد

و با افزایش ولوم کنترل جریان، دستگاه شروع به کار می‌کند.

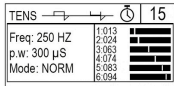


موج FAR:

در این پنجره می‌توان تنظیمات موج خروجی(فرکانس،

تاخیر پالس، Hold/Rest و زمان) را انتخاب و با افزایش

ولوم کنترل کننده‌ی جریان، دستگاه شروع به کار می‌کند.

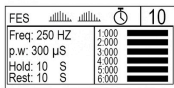


موج FES:

در این پنجره نیز می‌توان تنظیمات موج خروجی(فرکانس،

تاخیر پالس، Hold/Rest و زمان) را انتخاب و با افزایش

ولوم کنترل کننده‌ی جریان، دستگاه شروع به کار می‌کند.

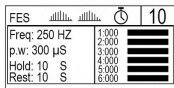



ET-6000

ElectroTherapy
6 Channels



ET-6000

ElectroTherapy
6 Channels



ET-6000

ElectroTherapy
6 Channels



ET-6000

ElectroTherapy
6 Channels



ET-6000

ElectroTherapy
6 Channels